



EasLift™ 电动支架

EasLift™ 电动支架

电动时代，智能升降！ EasLift™ 让您的样品处理更省力、更高效！



操作视频

人性化

- 人体工程学设计，操作简单、灵活，有效减轻了手部疲劳
- 升降自由度高，顺滑流畅，搅拌位置更准确

性能优越、易操作

- 内置高性能电机，运行平稳，无噪音
- 通过上下搅拌混合，以达到快速分散、均匀混合的理想处理效果

灵活

- 多种支臂适配器可选，满足不同品牌的搅拌设备，还可提供特殊定制服务

设计紧凑

- 伸缩式设计，结构紧凑，体积小，可放置通风柜使用

控制器

- 简易控制器，拨片式控制，可轻松快速实现上下移动搅拌混合
- 数显控制器，上下按键控制，实时数显高度；支持用户自定义预设行程，可存储四组特定升降高度，一键自动定位升降位置

安全

- 数显控制器，带限位功能，可自由设定立柱行程上下限位置，安全便捷
- 加厚铝合金底座，稳固承重，防倾翻，附带防滑垫片

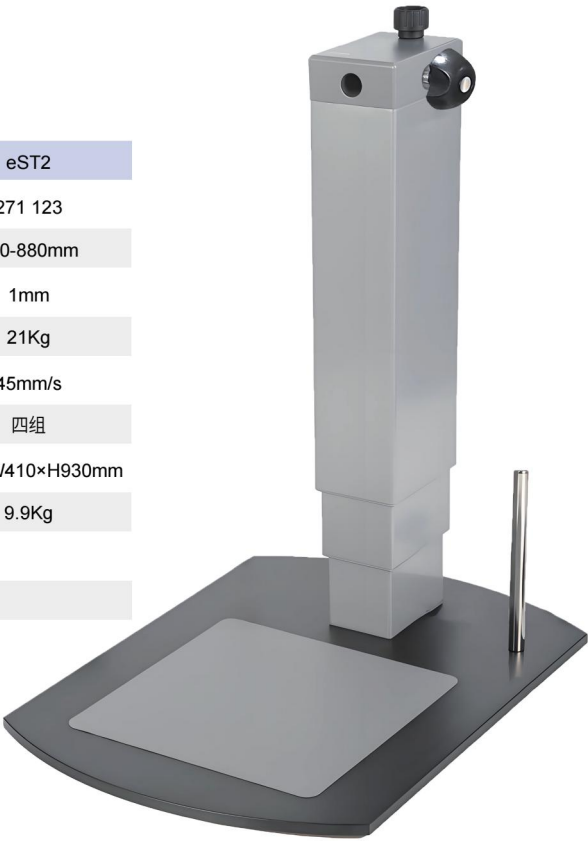
应用

- 适用于国内外大多数品牌的分散或搅拌设备，广泛应用于高校、科研、医学、工业研发等实验室领域



技术参数

型号	eST3	eST3+	eST2
订货号	271 131	271 132	271 123
升降范围	325-545mm	385-735mm	560-880mm
最小幅度	1mm	1mm	1mm
最大承载	15Kg	18.5Kg	21Kg
升降速度	45mm/s	45mm/s	45mm/s
预设程序	四组	四组	四组
外尺寸	L290×W410×H600mm	L290×W410×H785mm	L290×W410×H930mm
重量	8.5Kg	9.6Kg	9.9Kg
工作环境	5-40°C, ≤85%RH		
电源电压	AC220V, 50/60Hz; DC24V, 5.0A		

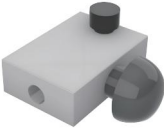
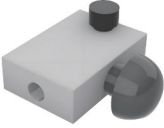
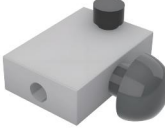
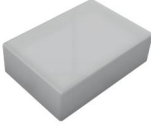
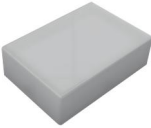


型号	eST3H+	eST2H	eST2H Max
订货号	272 120	272 121	272 122
升降范围	410-760mm	585-905mm	695-1200mm
最小幅度	1mm	1mm	2mm
最大承载	18.5Kg	21Kg	27Kg
升降速度	45mm/s	45mm/s	45mm/s
预设程序	四组	四组	四组
外尺寸	L350×W400×H800mm	L350×W470×H945mm	L450×W560×H1250mm
重量	7.7Kg	8.2Kg	11.8Kg
工作环境	5-40°C, ≤85%RH		
电源电压	AC220V, 50/60Hz; DC24V, 5.0A		

更多规格请垂询

附件

支臂/法兰适配器

订货号	273 013	273 016	273 019	273 009	273 010
型号	AD13	AD16	AD19	ADX1	ADX2
图示					
描述	适配Ø13mm支臂，铝制合金材质	适配Ø16mm支臂，铝制合金材质	适配Ø19mm支臂，铝制合金材质	平板螺栓固定，铝制合金材质	平板螺栓固定，不锈钢304材质

可提供更多规格适配器与定制服务

控制器

订货号	273 021	273 022	273 023	273 024
型号	KB1	KB2	KB3	KB4
图示				
描述	简易控制器，拨片式上下控制，RJ45接头，也可放置容器固定夹	数显控制器，液晶屏，可预设四组程序RJ45接头，IP66	手柄控制器，可预设四组程序，RJ45接头，IP66	遥控控制器，蓝牙接收器无线遥控，可预设四组程序IP66

容器固定夹

订货号	173 010	173 020	171 400	273 031	273 043
型号	CT15	CT50	DC80	DC150	RS13
图示					
描述	试管固定夹，夹持范围Ø10~25mm，用于夹持15ml离心管或相当容器	试管固定夹，夹持范围Ø20~40mm用于夹持50ml离心管或相当容器	烧杯固定夹，夹持范围Ø38~85mm，用于夹持烧杯或相当容器	万用固定夹，尼龙扣带，夹持范围Ø50~150mm，用于固定各种烧杯、烧瓶等容器	不锈钢夹头，容器固定夹专用，Ø13mm，不锈钢304材质

容器升降台

订货号	174 015	174 020	174 030
型号	LP15	LP20	LH30
图示			
描述	150×150mm 不锈钢材质，含防滑垫	200×200mm 喷漆涂层，镀锌钢板材质含防滑垫	300×300mm 不锈钢材质，含防滑垫





迪德·中国
www.disrad.com